


SECADO

Modelo SL60S

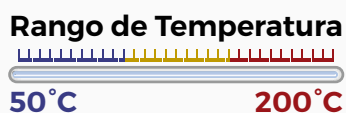

Medidas Internas
60 x 40 x 40

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro empotrado en el frente
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores luminicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformdad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 1 año con service gratuito de por vida (fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes rejilla regulables (5 Posiciones)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros) 96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 74 x 55 x 76
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 82 x 60 x 80

Otros

Consumo Wats 1400
Peso en Kg Neto 36
Peso en Kg con Embalaje 38

- Alta performance para uso continuo
- Bajo consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida